





Cómo Utilizar Su Nebulizador SideStream


Cómo utilizar su nebulizador SideStream

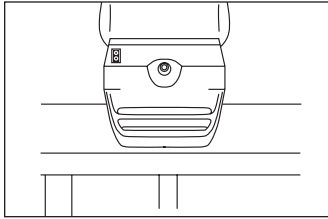


1. Coloque el compresor en una superficie sólida.

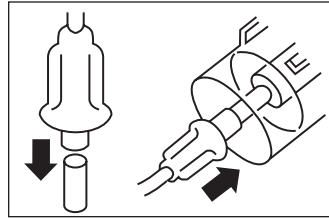


2. Conecte el tubo al compresor y a la taza para medicina.

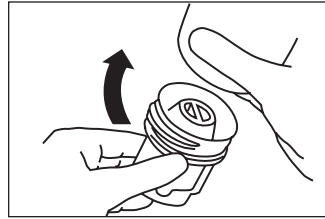


3. Desensrosque la tapa.

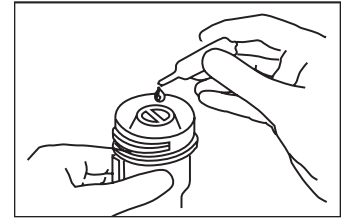


4. Llene la taza para medicina.

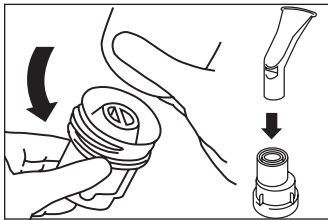


5. Coloque la tapa de nuevo. Conecte la boquilla.

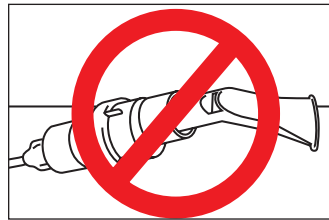


6. No incline el SideStream.

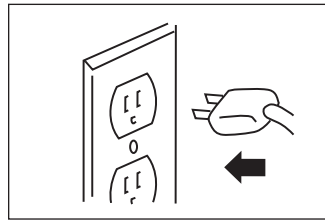

7. Enchufe el compresor.

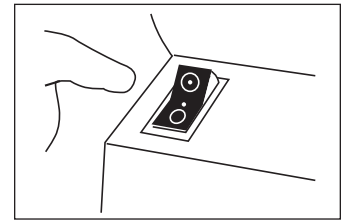


8. Accione el interruptor.

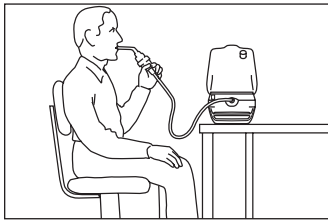


9. Siéntese erguido, relájese, e inhale y exhale lentamente.


Si necesita usar una máscara SideStream para adulto o pediátrico

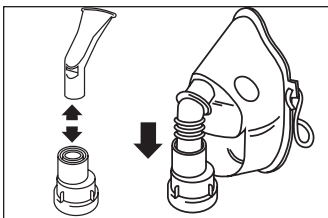

1. Reemplace la boquilla con el adaptador y la máscara.

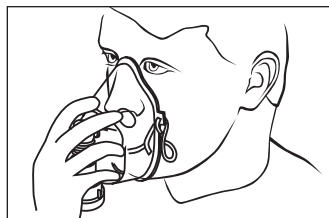

2. Coloque la máscara sobre la nariz y la boca.

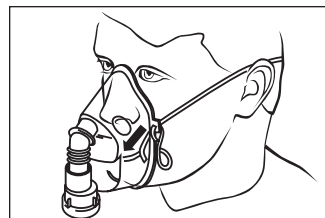


3. Coloque la banda sobre su cabeza y ajuste.






Instrucciones de Limpieza para su nebulizador


Después de cada uso (tanto para el SideStream reutilizable como para el desechable)...

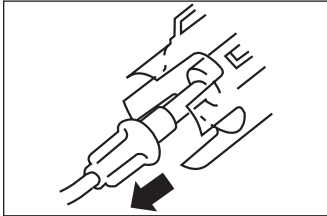

1. Desconecte el auricular del tubo.

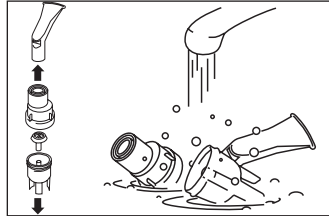


2. Desarme y lave todas las piezas en agua tibia jabonosa (excepto el tubo).

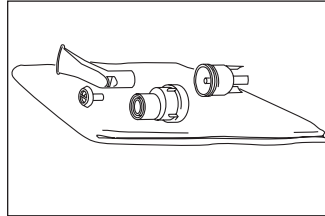


3. Enjuague en agua limpia y seque al aire.


Una vez por semana (solo para el SideStream reutilizable)...

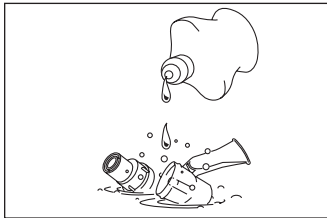

1. Coloque las partes (excepto el tubo) en agua con 2 a 3 gotas de jabón líquido lavavajillas.

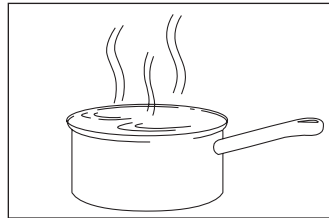

2. Hierva por 10 minutos.

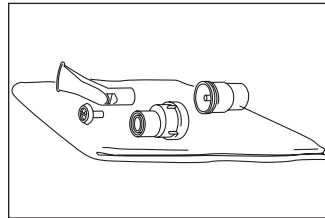

3. Enjuague en agua limpia durante 2 minutos y seque al aire.

